

## FLOCATH QUICK – SIKRERE OG MER SKÅNSOM

### HYGIENISK BESKYTTELSES- KAPPE

Kateteret kan anvendes uten at du er i direkte berøring med det, slik at du reduserer risikoen for infeksjon. Etter innføring kan beskyttelseskappen føres fremover for å forlenge kateteret ved blæretømming.

### HYDROFIL OVERFLATE

Unik overflatebehandling gir glatt og våt overflate.

### INTEGRERT POSE MED STERIL SALTVANNS- OPPLØSNING

Kateteret kan brukes hvor som helst og når som helst, fordi saltvannsuppløsningen er pakket sammen med kateteret.

**RUNDT  
PAKNINGSHULL**  
Pakningen kan enkelt åpnes og henges opp.

**DOBBELTSIDIG LIM**  
Enkelt oppheng av kateteret ved hjelp av dobbeltsidig lim.

**adCARE**  
Adding innovative healthcare

**ADCARE AS**  
Postboks 31, 1306 Bærum PT  
Telefon 67 53 33 44  
www.flocath.no

### ET TILTAK FOR Å REDUSERE INFEKSJONER FRA TELEFLEX MEDICAL



Vi jobber for pasientens sikkerhet, og tilbyr en rekke høy kvalitets produkter som er mindre invasive, reduserer infeksjonsrisikoen og er mer behagelige for pasienten. Basert på unik og utprøvet teknologi, fokuserer vi på å oppnå det ypperste resultatet for pasientene.

**TELEFLEX MEDICAL HOVEDKONTOR EUROPA, IRLAND**  
TELEFLEX MEDICAL EUROPE LTD.  
IDA Business Park, Athlone, Co Westmeath  
Telefon +353 (0)19 06 46 08 00, orders.intl@teleflexmedical.com

**BELGIA TELEFLEX MEDICAL**, 1932 Sint-Stevens-Woluwe  
Telefon +32 (0)2 333 24 60, info.be@teleflexmedical.com

**ENGLAND TELEFLEX MEDICAL**, High Wycombe, Bucks. HP12 3ST  
Telefon +44 (0)1494 53 27 61, info.uk@teleflexmedical.com

**FRANKRIKE TELEFLEX MEDICAL SAS**, 31460 Le Faget  
Telefon +33 (0)5 62 18 79 40, info.teleflexmedical.france@teleflexmedical.com

**ITALIA TELEFLEX MEDICAL S. r. l.**, 20039 Vareto (MB)  
Telefon +39 0362 58911, info.it@teleflexmedical.com

**NETERLAND TELEFLEX MEDICAL B.V.**, 1213 PE Hilversum  
Telefon +31 (0) 88-002 15 00, info.nl@teleflexmedical.com

**ØSTERIKE RÜSCH AUSTRIA Gesellschaft m.b.H.**, 1090 Wien  
Telefon +43 (0)1 402 47 72, rueschaustria@teleflexmedical.com

**PORTUGAL ARROW IBÉRIA, S.A.**, Rua Diamantina, 5, 4350-145 Porto  
Telefon +351 22 541 90 85

**SVEITS TELEFLEX MEDICAL GmbH**, 3123 Belp  
Telefon +41 (0)31 818 40 90, switzerland@teleflexmedical.com

**SLOVAKIA ARROW SLOVENSKO PIESTANY s.r.o.**,  
92101 Piestany, Telefon +421 (0)3377 254 28, arrow@arrow.sk

**SPANIA TELEFLEX MEDICAL IBERIA, S.A.**, 28806 Alcalá de Henares (Madrid)  
Telefon +34 918 300 451, info.es@teleflexmedical.com

**SØR AFRIKA TELEFLEX MEDICAL (Pty) Ltd.**, P.O. Box 1716, Kelvin 2054  
Telefon +27 (0)11 807 4887, assist.africa@teleflexmedical.com

**TSJEKKIA ARROW CZECH**, Hradec Kralove 500 04  
Telefon +420 (0)495 759 111

**UNGARN ARROW HUNGARY**, 1054 Budapest  
Telefon +36 (0)1 475 13 60

Mer information:  
[www.teleflexmedical.eu](http://www.teleflexmedical.eu)

940303 - 0000NO - REV A - PREPRINT - 10 10

## FLOCATH QUICK SMARTERE OG SIKRERE

## NYHET I NORGE

FLOCATH QUICK ER ENESTE KATETER MED BESKYTTELSES-  
KAPPE FOR BAKTERIEFRI INNFORING. FRA VERDENS  
LEDENDE PRODUSENT AV HJELPEMIDLER INNEN UROLOGI.

[WWW.FLOCATH.NO](http://WWW.FLOCATH.NO)

**Teleflex**  
MEDICAL

**Teleflex**  
MEDICAL

## FLOCATH QUICK ALLE GODE TING ER 3:

- Eneste kateter med beskyttelseskappe, slik at du kan ta på kateteret ved innføring, uten å berøre det.
- Unik hydrofil overflate som reduserer friksjonen under hele kateteriseringen.\*
- Kateteret leveres med integrert saltvannsuppløsning. Klar til bruk.

\* Måling av friksjon basert på vitenskapelige tester utført ved SP Swedish National Testing and Research Institute.

### DIN TRYGGHET OG SIKKERHET ER VÅRT FOKUS

Flocath Quick har en forbedret glatt og våt overflate som holder under hele kateteriseringen. Du kan ta på kateteret og fortsatt holde det bakteriefritt, slik at risikoen for urinveisinfeksjon er lavest mulig. Kateteret er behagelig å bruke. Kateterhullene er grundig polerte.

Den hydrofile overflaten er basert på PVP (polyvinyl-pyrrolidone), men ytterligere forbedret for å gi en mer skånsom, holdbar og jevn overflate. Dette gir Flocath Quick ytterligere sikkerhet ved bruk.

## SÅ KOMFORTABELT SOM MULIG

Intermitterende kateterisering ligger vårt hjerte nært, fordi det betyr å gi pasienter forbedret livskvalitet, fleksibilitet og mobilitet. Hos Teleflex er vi svært opptatt av å tilby optimale produkter basert på avansert medisinsk teknologi. En av resultatene er vårt nye kateter; Flocath Quick.

### EFFEKTIVT OG SIKKERT

Flocath Quick er et "klart til bruk" hydrofil-dekket blæretømmingskateter, med særdeles gode glideegenskaper. Kateteret kan når som helst og hvor som helst tilby deg en enkel, diskret og behagelig blæretømming.

Pakningen inneholder en pose sterilt saltvann som aktiverer den hydrofile overflaten. En smart beskyttelseskappe på kateteret gjør at du kan ta på kateteret ved innføring, uten å berøre det. Det hjelper også til å forlenge kateteret ved blæretømming.

### IDEELT - NÅR SOM HELST

Flocath Quick er utrolig enkelt å ta med seg.



### FLOCATH QUICK BESTILLINGSINFORMASJON

REF.	STØRRELSE	LENGDE	STK
85 12 41	Ch. 8-20	40 cm	30
85 12 21	Ch. 8-20	20 cm	30


VED BESTILLING, VENNLIGST OPPGI REF OG STØRRELSE

## FLOCATH QUICK – SÅ ENKELT DET KAN BLI


### SIKKER, SMART OG KLAR TIL BRUK INNEN 30 SEKUNDER.




Husk å vaske hendene før og etter tømning.

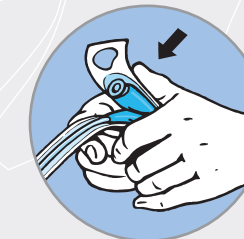

Brett og klem kateteret slik at saltvannsuppløsningen kommer ut av posen.

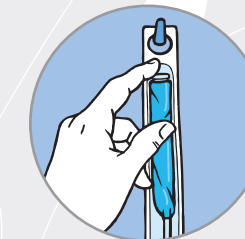


Heng kateteret på en knagg eller på egnet sted med pakningens dobbeltsidige lim.

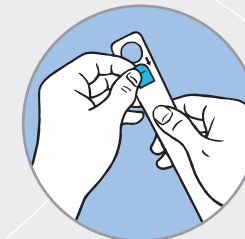


Overflaten er aktivert etter 30 sekunder.




Åpne forpakningen ved pilene ca 10 cm. Ta ut kateteret.

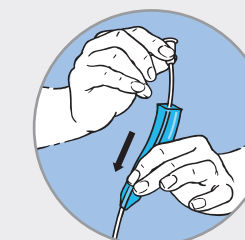

Når du holder i kateteret fører du den blå beskyttelseskappen fremover mot tuppen. Kappen vil gli lett fremover.

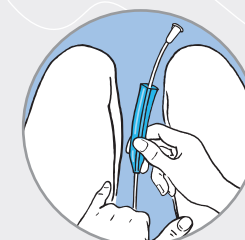

Hold i beskyttelseskappen og utfør kateterisering som vanlig.

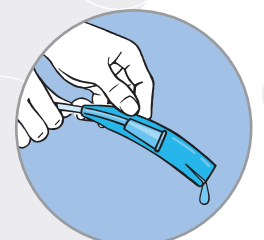

Beskyttelseskappen kan føres bakover og eventuelt benyttes som en forlengelse av kateteret ved tømning.